


LABline 사용 전 준비


1. ABset을 기존 혈관내혈압계를 설치하는 방법과 동일하게 준비하고, 라인 내부의 공기를 제거합니다.

2. ABset의 트랜스듀서를 LABline Pump 앞 쪽 거치대에 설치합니다.

- 1) 트랜스듀서의 모니터 케이블이 Pump의 다른 구조물에 걸리지 않도록, 모니터 케이블과 바로 옆의 라인을 함께 붙잡으십시오.

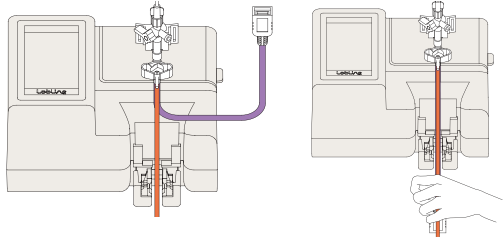


- 2) 트랜스듀서를 위에서 아래 방향으로 밀어넣으십시오. 본체의 양날개와 pigtail 옆의 보라색 날개 모두 구조물에 끝까지 들어가야 합니다.

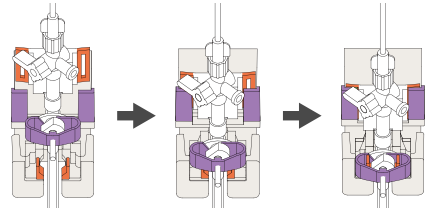


3. Pump 상단의 뚜껑을 열고 ABset의 펌프튜브를 설치한 후 뚜껑을 닫습니다.

* 뚜껑이 끝까지 닫히지 않는다면 슬라이드 b를 한 번 더 끝까지 밀어넣고 뚜껑을 닫으십시오.

- 1) 펌프튜브는 모양이 다른 두개의 슬라이드가 있고, 그 슬라이드 모양을 펌프에 표시해 두었습니다.

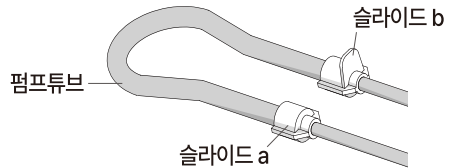

- 2) 알맞은 모양의 슬라이드를 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 밀어넣으십시오. 이때 슬라이드의 날개를 평행하게, 끝까지 밀어넣어야 합니다.

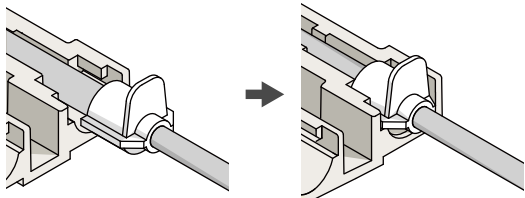

3) 로터리에 펌프튜브를 감고 나머지 슬라이드를 장착하십시오.

4) 센서부에 펌프튜브가 들어갔는지 확인한 후 뚜껑을 닫습니다.

4. ABset의 말단을 환자의 동맥과 연결하고 환자감시모니터에서 제로잉 합니다.

LABline 혈액보존채혈


1. 채혈을 위한 준비를 완료하고 LABline Pump 화면의 '20초 동안 채혈하기' 버튼을 누르십시오.

* 라인 내에 혈액을 저장하는 중이니 주사기를 연결하지 마십시오.




2. '채혈을 시작하세요'라는 안내음성이 나오면 주사기를 연결하고 채혈하십시오.

* 화면의 시간은 채혈 가능한 시간초입니다. 시간이 부족하면 화면의 일시정지 버튼을 누르십시오.

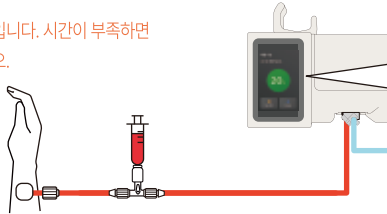

3. 화면의 시간이 끝나면 자동으로 FLUSH가 진행되니, 그 전에 주사기를 분리하십시오.

* 채혈포트의 3WAY가 닫혀있으면 FLUSH 중 압력 이상이 발생하므로 주의하십시오.

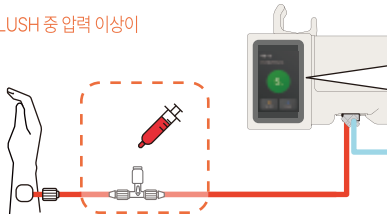

4. Pump가 라인 내 혈액과 수액을 환자에게 FLUSH한 후 자동 종료됩니다.

